



BAMBA IONICARE TOOTHCARE JET FRESH

Prenosna zobna prha

Navodila za uporabo



VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila. Navodila shranite za prihodnjo uporabo ali za nove uporabnike.

- Prepričajte se, da napetost v električnem omrežju ustreza vrednosti, navedeni na oznaki naprave, in da je vtičnica ozemljena.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo morebitna tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenje in vzdrževanje brez nadzora ni dovoljeno za otroke.
- Naprava mora delovati pri nizki varnostni napetosti, kot je navedeno na oznaki.
- Uporabljajte samo čisto vodo ali posebej namenjene raztopine.
- Da bi se izognili nevarnosti opeklin, električnega udara, požara ali poškodb:
- Ne priključujte in ne izključujte polnilca z mokrimi rokami. Napajalnik vedno izključite tako, da ga primete za vtičač, ne za kabel.
- Redno preverjajte kabel polnilca za morebitne poškodbe. Če je kabel ali polnilec poškodovan, ne deluje pravilno ali je padel, se obrnite na uradno tehnično podporo podjetja Cecotec.
- Ko je naprava napolnjena, izključite polnilec iz električne vtičnice.
- Naprave in kabla ne izpostavljajte ognju ali virom toplote.
- Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je priključena v električno omrežje.
- Napravo polnite izključno s polnilcem, ki ga je priložilo podjetje Cecotec. Uporaba drugega polnilca ni dovoljena.
- Napravo uporabljajte le za namene, opisane v tem priročniku.
- Uporabljajte le nastavke in dodatke, ki jih priporoča ali prodaja Cecotec.
- V odprtine ali cevke ne vstavljajte nobenih tujih predmetov.
- Ne usmerjajte curka vode pod jezik, v ušesa, nos ali druga občutljiva območja, saj lahko visok tlak povzroči resne poškodbe.
- Ne uporabljajte naprave, če nosite ustni nakit – pred uporabo ga odstranite.
- Naprave ne uporabljajte, če imate odprte rane v ustih ali na jeziku. Če vam je zdravnik predpisal antibiotično zaščito pred stomatološkimi posegi, se pred uporabo posvetujte z zobozdravnikom.
- Naprava je namenjena le za domačo uporabo in ni primerna za gostinske, hotelske, pisarniške ali industrijske prostore.
- Ko naprave ne uporabljate, jo shranite na suhem in varnem mestu skupaj z navodili.
- Ob prvih uporabah lahko pride do krvavenja dlesni, kar je običajno in se z redno uporabo zmanjša. Po potrebi zmanjšajte moč delovanja.
- Ne uporabljajte naprave brez nameščenega nastavka.
- Ne postavljajte naprave na vroče, vlažne ali neposredno osvetljene površine.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite napravo in poskrbite, da se ne polni.
- Osebe s parodontalno boleznijo ali po oralnem kirurškem posegu v zadnjih 2 mesecih naj se pred uporabo posvetujejo z zdravnikom.
- Ne poskušajte naprave odpirati, razstavljati ali popravljati sami. V napravi ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik.
- Za čiščenje ust nikoli ne uporabljajte vode, toplejše od 40 °C.
- Naprava je namenjena izključno za ustno higieno.
- Ne vstavljajte nastavka med dlesni in zobe – to lahko povzroči poškodbe.
- Ne uporabljajte joda, slane vode ali eteričnih olj, ki niso topna v vodi, saj to zmanjša učinkovitost naprave in skrajša njeno življenjsko dobo.
- Ne uporabljajte nerazredčene ustne vodice. Če želite uporabljati ustno vodicco, jo predhodno ustrezno razredčite.

Navodila za baterijo

- Naprava vsebuje baterijo, ki je ni mogoče zamenjati.
- Naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Ne sežigajte je in je ne izpostavljajte visokim temperaturam, saj lahko eksplodira.
- OPOZORILO: za polnjenje baterije uporabljajte izključno napajalni kabel, priložen napravi.
- V izjemnih pogojih lahko pride do puščanja baterije ali celic. Ne dotikajte se tekočine, ki izteče iz baterije. Če tekočina pride v stik s kožo, takoj sperite z milom in vodo. Če pride v oči, jih takoj sperite s čisto vodo vsaj 10 minut in poiščite zdravniško pomoč. Pri ravnanju z baterijo uporabljajte zaščitne rokavice in jo nemudoma odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Baterije hranite izven dosega otrok, kadar obstaja nevarnost zaužitja.
- Zaužitje baterije lahko povzroči opekline, predtje mehkih tkiv in smrt. Hude poškodbe se lahko pojavijo že v dveh urah po zaužitju.
- V primeru zaužitja baterije takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Ne izpostavljajte baterij toploti ali ognju. Izogibajte se shranjevanju na neposredni sončni svetlobi.
- Baterij ne izpostavljajte mehanskim udarcem.
- Baterije ne puščajte dolgo časa priključene na polnjenje, če naprave ne uporabljate.
- Po daljšem obdobju neuporabe boste morda morali baterijo večkrat napolniti in izprazniti, da dosežete največjo zmogljivost.
- Baterijo odstranite in odložite na ustrezen način.
- Priporočena temperatura prostora med polnjenjem baterije je med 4 °C in 40 °C.
- Priporočena temperatura prostora za shranjevanje baterije je med 0 °C in 50 °C.
- Priporočena temperatura prostora med polnjenjem je med 5 °C in 50 °C.

1. DELI IN KOMPONENTE

Slika 1

1. Nastavek
2. Gumb za sprostitvev nastavka
3. Gumb za vklop/izklop
4. Gumb za menjavo načina delovanja
5. Indikatorska lučka za običajni način
6. Indikatorska lučka za pulzni način
7. Indikatorska lučka za nežni način
8. Indikatorska lučka za baterijo
9. Pokrov rezervoarja za vodo
10. Rezervoar za vodo
11. Glavno ohišje
12. Polnilna vrata

Dodatki

Slika 2

1. Klasični nastavek za splošno uporabo (2 kosa)
2. Ortodontski nastavek

OPOMBA:

Grafični prikazi v tem priročniku so shematični in se morda ne ujemajo popolnoma z dejanskim izdelkom.

2. PRED UPORABO

- Naprava je zapakirana tako, da je med transportom zaščitena. Vzemite napravo iz škatle in odstranite vse embalažne materiale. Originalno škatlo in druge embalažne elemente lahko shranite za primer, če boste napravo v prihodnosti prenašali. Če embalažo zavržete, poskrbite, da jo boste reciklirali v skladu s predpisi.

- Preglejte, ali so priloženi vsi deli in ali so v dobrem stanju. Če kateri del manjka ali je poškodovan, se takoj obrnite na pooblaščen tehnično podporo podjetja Cecotec.

3. DELOVANJE

Polnjenje naprave

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena.
- Odmaknite pokrovček priključka za polnjenje, da dostopate do njega.
- Priključite napajalni kabel na napravo in nato na ustrezen napajalni adapter.
- Napravo popolnoma napolnite pred prvo uporabo ali po daljšem obdobju neuporabe.
- Ne polnite baterije med posameznimi uporabami – ko je baterija napolnjena, počakajte, da se popolnoma izprazni, preden jo ponovno napolnite.

Uporaba naprave

1. Pred prvo uporabo popolnoma napolnite baterijo.
2. Odprite pokrov rezervoarja za vodo in ga napolnite z mlačno vodo. Ko je poln, pokrov zaprite.
3. Pritisnite gumb za vklop, da napravo vključite ali izključite.
4. Prenosna zobna prha ima tri različne načine pritiska: normalen, pulzirajoč in nežen. Za spremembo pritiska pritisnite gumb za izbiro načina.

Opomba: ob prvi uporabi zobne prhe priporočamo začetek z nežnim načinom in postopno povečanje pritiska vode v naslednjih tednih.

5. Ko končate z uporabo, pritisnite gumb za vklop, da napravo izklopite. Naprava se samodejno izklopi po 2 minutah neaktivnosti.
6. Rezervoar po uporabi izpraznite pred shranjevanjem.

Opomba: če morate med uporabo ponovno napolniti rezervoar, najprej izklopite napravo, napolnite rezervoar in nato ponovno vklopite.

4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje glavnega ohišja

- Za čiščenje naprave uporabljajte samo čisto vodo in nevtralno čistilo. Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil. Ne čistite nobenega dela naprave z vodo nad 50 °C, saj lahko to poškoduje napravo in zmanjša njeno učinkovitost.
- Če zobno prho potopite v vodo za čiščenje, se prepričajte, da je pokrov priključka za polnjenje pravilno zaprt. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb naprave.

Čiščenje rezervoarja za vodo

Notranjost rezervoarja sperite s čisto vodo pri sobni temperaturi. Za čiščenje ne uporabljajte nobenega detergenta.

Odstranjevanje vodnega kamna

- Glede na vsebnost mineralov v uporabljeni vodi se lahko v napravi nabere vodni kamen. Če ga ne odstranite, lahko vpliva na delovanje naprave.
- Usmerite nastavek v umivalnik, vklopite napravo in jo pustite delovati, dokler ne izprazni vse vode. Nato napolnite rezervoar s čisto, toplo vodo in postopek ponovite. Ta postopek čiščenja ponovite vsakih 1–3 mesece za ohranjanje optimalne zmogljivosti naprave.

Vzdrževanje baterije

- Prepričajte se, da je baterija pred prvo uporabo popolnoma napolnjena.
- Pred daljšim shranjevanjem poskrbite, da je baterija popolnoma izpraznjena.
- Za daljšo življenjsko dobo baterije napravo napolnite takoj, ko je baterija skoraj prazna.

5. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
Pojavlja se puščanje med nastavkom in ohišjem.	Nastavek ni pravilno nameščen. Tesnilo nastavka je poškodovano.	Odstranite nastavke in jih ponovno pravilno namestite, tako da se dobro prilegajo. Če težava ne izgine, se obrnite na uradno tehnično podporo podjetja Cecotec za zamenjavo tesnila.
Pojavlja se puščanje pri dovodu vode.	Tesnilo je poškodovano ali so v dovodu nečistoče.	Obrnite se na uradno tehnično podporo podjetja Cecotec za popravilo.
Pojavlja se puščanje iz rezervoarja za vodo.	Tesnilo pokrova je poškodovano ali nepravilno nameščeno.	Tesnilo pravilno namestite ali ga po potrebi zamenjajte z novim – prek uradne tehnične podpore Cecotec.
Pritisk vode ni zadosten.	Baterija je skoraj prazna.	Poskusite znova po polnjenju naprave.
Naprava se ne vklopi.	Baterija je skoraj prazna.	Napravo ponovno uporabite, ko bo popolnoma napolnjena.
Naprava ne izpusti vode.	Napravo uporabljate prvič ali pa dolgo ni bila v uporabi. Rezervoar za vodo je prazen.	Dodajte ustrezno količino vode v režo držala nastavka in poskusite znova po namestitvi nastavka. Prepričajte se, da je v rezervoarju dovolj vode.

Če težava kljub upoštevanju zgornjih navodil ne izgine, se obrnite na uradno tehnično podporo podjetja Cecotec.

6. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Referenca izdelka: 04406

Izdelek: Bamba ToothCare Jet Fresh

Prenosna zobna prha: Vhod 5 V =, 1 A

Baterija: Litij-ionska, 3,7 V, 900 mAh, 3,33 Wh

Vodoodpornost: IPX7

Frekvenca pulziranja: 1200 utripov/min

Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšav kakovosti izdelka.
Izdelano na Kitajskem | Oblikovano v Španiji


7. ODSTRANJEVANJE STARIH ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV




Ta simbol pomeni, da je treba izdelek in/ali baterije v skladu z veljavnimi predpisi odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko ta izdelek doseže konec svoje življenjske dobe, odstranite baterije/akumulatorje in jih odnesite na zbirno mesto, ki ga določijo lokalni organi. Potrošniki naj se za informacije o pravilnem ravnanju s starimi napravami in/ali njihovimi baterijami obrnejo na lokalne organe ali prodajalca. Skladnost z navedenimi smernicami prispeva k varovanju okolja.

8. AVTORSKE PRAVICE

Pravice intelektualne lastnine nad besedili v tem priročniku pripadajo podjetju CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Vse pravice pridržane. Vsebina te publikacije se ne sme v celoti ali delno reproducirati, shranjevati v sistemu za shranjevanje, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način (elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače) brez predhodnega dovoljenja podjetja CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

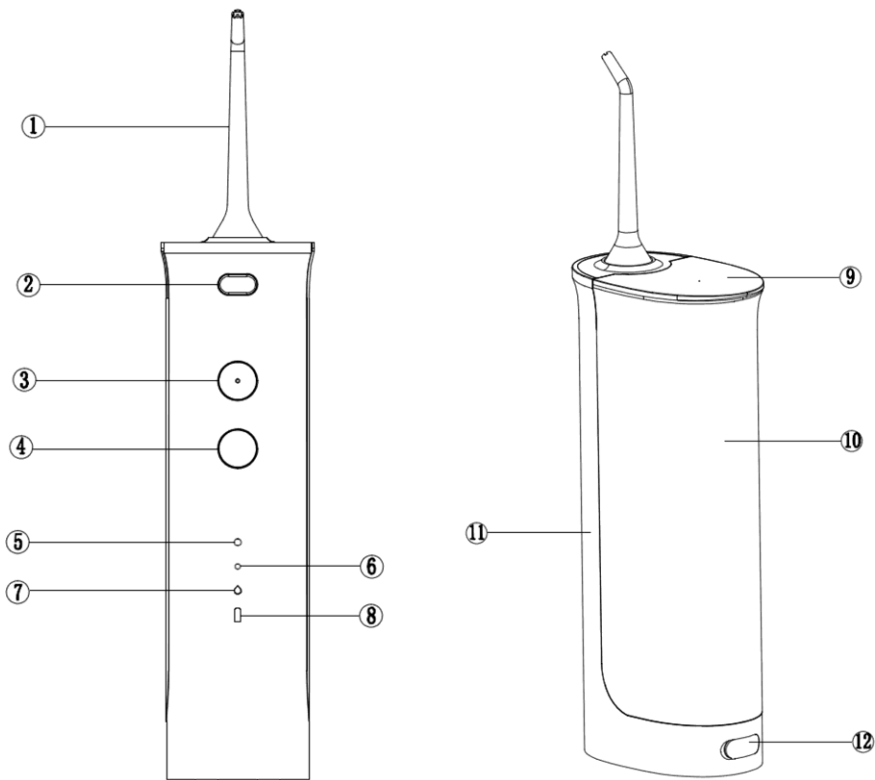

Slika 1

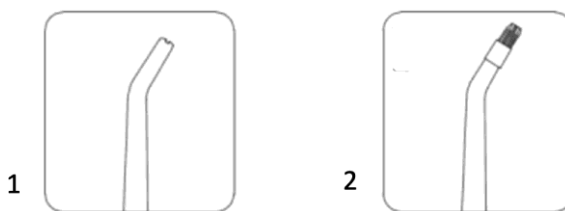

Slika 2

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku. Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa.

Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK :24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje oseb
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **Bamba ToothCare Jet Fresh**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

KRON IT, d.o.o.

Prezemno mesto Maribor:

Zagrebška cesta 83a, 2000 Maribor

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Prezemno mesto Ljubljana:

Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808