


BRAUN

Silk.expert 5



91573658/VI-17 B

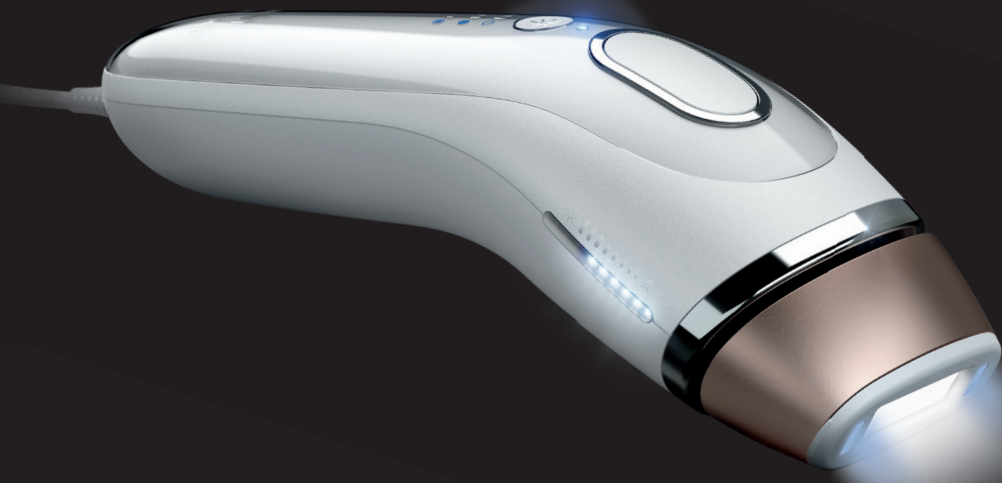

Type 6029

www.braun.com

BD 5001

BD 5006

BD 5007

BD 5008

BD 5009




Braun Infolines

English	4
Polski	12
Český	21
Slovenský	29
Magyar	37
Hrvatski	45
Slovenski	53
Türkçe	61
Română (RO/MD)	71
Ελληνικά	80
Български	89
Русский	98
Українська	108







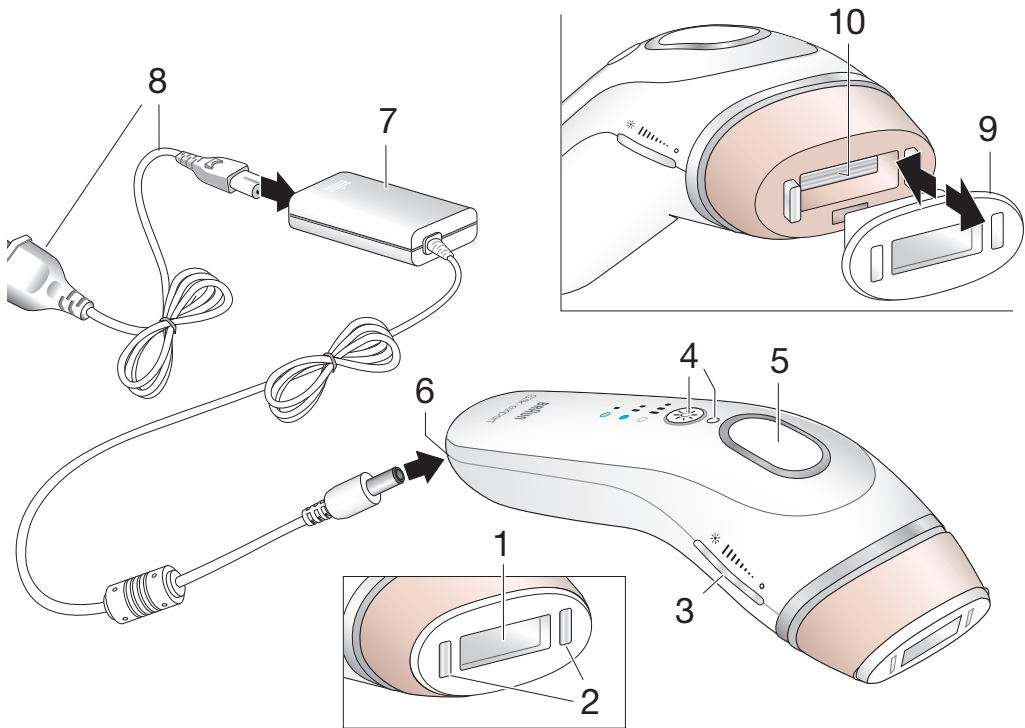





UK	0800 783 7010
IE	1 800 509 448
PL	801 127 286 801 1 BRAUN
CZ	221 804 335
SK	02/5710 1135
HU	(06-1) 451-1256
HR	091 66 01 777
SI	080 2822
RO	021.224.30.35
GR	210-9478700
TR	0850 220 0911
RU	8 800 200 20 20
UA	0 800 505 000

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
www.braun.com
www.service.braun.com





Skin tone & Body hair type chart:

						
	I	II	III	IV	V	VI
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ = suitable / odpowiedni / vhodné / vhodné / megfelelő / pogodno / primerno / adecvat / κατάλληλο / подходящий / подходить / підходити

✗ = not suitable / nieodpowiedni / použití není vhodné / nevhodné / nem megfelelő / nije pogodno / kullanım için uygun / ni primerno / neadecvat / ακατάλληλο / не е подходящ / не подходить / не підходить

Slovenski

Naši izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in oblike. Naprava za odstranjevanje dlak z intenzivno pulzno svetlobo (IPL) Braun Silk-expert, ki uporablja profesionalno svetlobno tehnologijo, vam omogoča trajno odstranjevanje neželenih, vidnih dlak v udobju vašega doma. Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo, vključno z vsemi kontraindikacijami, opozorili in varnostnimi informacijami, ter jih shranite za poznejšo uporabo.

Ta naprava je zasnovana tako, da po določenem času uporabe naprave dolgotrajno zmanjša rast dlak. Naprava je najprimernejša za uporabo na naslednjih mestih:

Ženske: noge, roke, pazduhe, predel bikinija in obraz (pod ličnicami)
POZOR: Naprave ne uporabljajte v bližini oči in vzdolž čela.

Moški: od ramen navzdol (prsni koš, hrbet, roke, trebuh, noge)
POZOR: Ne uporabljajte na obrazu, vratu in v predelu genitalij.
Uporaba na predelu moške brade ali za dlake na obrazu lahko vodi v trajne ali neenakomerne rezultate, ki lahko povzročijo neželene spremembe na obrazu.


Naprava Braun Silk-expert ni primeren za vsakogar. Najučinkovitejša je pri uporabi na svetli do srednje temni koži in temnih dlakah. Oglejte si preglednico s kožnimi odtenki in barvnimi odtenki dlak na 3. strani, da ugotovite, ali je naprava primerna za vas.

Opis

- 1 Svetlobno okence
- 2 Senzorji SensoAdapt™ za zaznavanje kožnega odtenka
- 3 LED-kazalnik vklopa/izklopa
- 4 Gumb za nastavljanje jakosti svetlobe s kontrolno lučko
- 5 Gumb za uporabo
- 6 Napajalni vhod
- 7 Napajalnik
- 8 Napajalni kabel
- 9 Snemljiv sprednji del z odsevnim svetlobnim okencem
- 10 Stekleni filter

Kako deluje?

Naprava Braun Silk-expert deluje na melanin v mešičku dlake pod površino kože in s tem pripomore k prekinitvi cikla ponovne rasti dlake. S stalno in redno uporabo svetlobna energija neželenim dlakam prepreči, da bi dosegle površino kože.

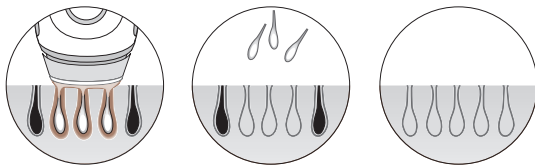

Inteligentni senzorji za zaznavanje kožnega odtenka SensoAdapt™ (2) nenehno zaznavajo kožni odtenek pred vsakim svetlobnim impulzom, pri tem pa samodejno uravnavajo moč svetlobe za najboljšo učinkovitost in varnost. To omogoča uporabo na ustreznih kožnih odtenkih in vam hkrati prepreči uporabo, če imate pretemen kožni odtenek.

KONTRAINDIKACIJE

Naprave NE UPORABLJAJTE ...

- Če imate temnejši kožni odtenek od odtenka V, prikazanega v preglednici s kožnimi odtenki na 3. strani. Ker temna koža vpije več svetlobne energije, lahko uporaba na zelo temni koži povzroči nelagodje/bolečino in neželene učinke (npr. opekline, mehurje, razbarvanje ali brazgotine) ter poškoduje kožo.

- Če ste noseči, dojdite ali ste mlajši od 18 let, saj naprava ni bila preizkušena pri teh skupinah posameznikov.
- Če ste v preteklosti imeli kožnega raka ali predrakave lezije (npr. nevusi ali veliko število znamenj).
- Če ste nedavno pridobili umetno ali naravno zagorelost. Vaša koža je lahko po izpostavljanju sončnim žarkom dodatno občutljiva in še posebej dovzetna za stranske učinke uporabe IPL (npr. opekline, mehurji, razbarvanje ali brazgotine na koži). Prav tako se po uporabi IPL izogibajte izpostavljanju neposredni sončni svetlobi. Koža je lahko dodatno občutljiva in še posebej dovzetna za sončne opekline.

Prav tako lahko določeni pogoji prepovedujejo uporabo te naprave.

Naprave NE UPORABLJAJTE v naslednjih primerih:

- Če imate kronično bolezen.
- Če imate kronično kožno obolenje (npr. luskavico ali vitiligo) ali poškodovano kožo (npr. sončne opekline, ureznine, odprte rane ali aktivne okužbe) na področjih, na katerih želite uporabiti napravo.
- Če imate krčne žile na področju, kjer želite uporabiti napravo.
- Če veste, da ste preobčutljivi na sončno svetlobo (fotosenzitivnost), ali če jemljete zdravila, ki lahko povečajo občutljivost kože (npr. Retin A, Accutane in/ali drugi lokalni retinoidi).
- Če ste na mestu, kjer želite uporabiti napravo, izvedli postopek luščenja kože («piling»).
- V zgornjih primerih lahko naprava kožo poškoduje ali obstoječe stanje še poslabša. Lahko se pojavijo neželeni učinki, kot so opekline, mehurji in spremembe barve kože (hiper- ali hipopigmentacije) ali brazgotine.

Če niste prepričani, ali je uporaba naprave varna za vas, se posvetujte s svojima zdravnikom ali dermatologom.

Če redno in dalj časa jemljete kakršna koli zdravila, se posvetujte s svojim zdravnikom glede morebitnega vpliva na občutljivost kože na svetlobo.

OPOZORILA

NE UPORABLJAJTE na ...

- Lasišču, obrveh ali v bližini ali v okolici oči. Uporaba na teh mestih lahko povzroči trajne poškodbe oči.
- Rdečih, zelo svetlih, sivih ali belih dlakah. Naprava ni učinkovita na teh barvah dlak.
- Bradavicah, spolovilu ali okoli anusa. Na teh predelih je lahko barva kože temnejša in/ali je prisotna večja gostota dlak, zaradi česar lahko uporaba naprave povzroči nelagodje/bolečino oz. poškodbe kože.
- Temno rjavih ali črnih pikah, kot so pege, materina znamenja, ali bradavice na mestih uporabe.
- Tetovažah ali trajnih ličilih na mestih uporabe.
- Bradi/obraznih dlakah pri moških.

NE glejte neposredno v stekleni filter (10) oziroma naprave ne usmerjajte proti očem. Za zaščito svojih oči in oči oseb v bližini se bo naprava vklopila samo, ko sta

oba sensorja za zaznavanje kožnega odtena v stiku s kožo. Če se naprava vklopi, ko je samo en senzor v stiku s kožo oziroma ni noben senzor v stiku s kožo, napravo takoj PRENEHAJTE uporabljati in se obrnite na prodajalca.

Napravo na istem območju UPORABLJAJTE največ enkrat tedensko na istem območju. Z večkrat tedensko uporabo ne boste pospešili rezultatov, hkrati pa lahko povečate možnost za poškodbe kože.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Naprava je namenjena za enega uporabnika.
- Naprava ni namenjena osebam, mlajšim od 18 let.
- Osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo samo pod nadzorom, razen če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, povezane z njeno uporabo.
- Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne bodo igrali z napravo. Napravo vselej shranite zunaj dosega otrok.


ELEKTRIČNA IN POŽARNA VARNOST

Napravo in kable redno pregledujte zaradi vidnih znakov poškodb. V primeru poškodb ali razpok napravo prenehajte uporabljati. Uporaba poškodovane naprave vodi v električni udar. V primeru okvare naj napravo pregledajo in popravijo v pooblaščenem servisnem centru. Nepooblaščen popravila lahko vodijo v resno nevarnost za uporabnika. Po uporabi napravo vedno izključite.

NEVARNOST

Naprave nikoli ne poskušajte popravljati in odpirati sami, saj ste lahko pri tem izpostavljeni nevarnim električnim sestavnim delom in energiji pulzirajoče svetlobe, ki lahko povzroči resne telesne poškodbe in/ali trajne poškodbe oči.

OPOZORILO

Da preprečite poškodbe ali nevarnost električnega udara ali nevarnost požara, napravo uporabljajte samo s priloženim napajalnim kablom (8) in napajalnikom (7)  (CyDen tip 6027 ipd.).

Naprave NE uporabljajte v vodi ali njeni bližini in na mokrih površinah, kot so kopalne kadi, tuši, bazeni ali druge posode, ki vsebujejo vodo. Če se naprava zmoči, je ne smete uporabljati. Uporaba mokre naprave lahko vodi v električni udar.



NE uporabljajte poškodovane naprave (npr. razpoke v ohišju, poškodovan kabel itd.). Notranji deli so pod električno napetostjo, ki je lahko nevarna.

Naprave NE uporabljajte, če je stekleni filter (10) počen ali če ni nameščen. Stekleni filter redno pregledujte zaradi poškodb.

Steklenega filtra se NE dotikajte med uporabo ali takoj po uporabi, saj se ta segreje.

Naprave NE čistite s čistili na osnovi nafte ali vnetljivih čistil (alkohola, acetona), saj ta predstavljajo nevarnost požara.

NE uporabljajte jedkih čistil. Ta lahko poškodujejo ali opraskajo stekleni filter.

Naprave NE poskušajte uporabljati za druge namene, razen za odstranjevanje neželenih dlak.

Naprave NE aktivirajte na drugih površinah, razen na koži.

Naprave NE aktivirajte, če svetlobno okenca (1) ni povsem v stiku s kožo.

NE zamašite prezračevalnih odprtin. Naprava se lahko pregreje in predstavlja nevarnost električnega udara ali požara.

UPORABA

Priprava mesta, kjer boste uporabili napravo

Pred uporabo naprave odstranite vse vidne dlake s kože. Uporabite lahko svoj najljubši način odstranjevanja dlak. Zagotoviti morate, da na površini kože ni ostankov dlak, saj lahko to poškoduje snemljiv sprednji del (9) in povzroči nelagodje med uporabo. Očistite mesto, kjer boste uporabili napravo, in ga osušite.

Vklop naprave:

Napajalni kabel (8) vključite v električno vtičnico. Napajalnik (7) vključite v napajalni vhod (6). LED-kazalnik vklopa/izklopa (3) enkrat zasveti in za kratek čas se vklopi ventilator. To pomeni, da je naprava v stanju PRIPRAVLJENOSTI. Med delovanjem se naprava nekoliko segreje.

Gumb za nastavljanje jakosti svetlobe (4)

○ Normalno delovanje: Naprava se po priključitvi v električno omrežje vklopi pri polni jakosti svetlobe, ki jo nakaže bela kontrolna lučka.



Nežno delovanje: Pritisnite gumb (4), da preklopite v način z zmanjšano jakostjo svetlobe. Kontrolna lučka zasveti v modri barvi.

Posebej nežno delovanje: Znova pritisnite gumb: Kontrolna lučka začne utripati v modri barvi.

Če želite preklopiti na polno zmogljivost, znova pritisnite gumb.

Načina nežnega in posebej nežnega delovanja sta namenjena občutljivim predelom ter novim uporabnikom. Ob zmanjšani jakosti svetlobe boste za doseganje zelenega učinka napravo morda morali uporabiti večkrat.

Samodejno odčitavanje kožnega odtenka

Ko sta oba senzorja za zaznavanje kožnega odtenka (2) v stiku s kožo, naprava odčita vaš kožni odtenek in izbere ustrežno moč svetlobe, ki jo nakazuje bela lučka LED na kazalniku (3). To pomeni, da je naprava pripravljena na oddajanje svetlobnih impulzov.

	svetel kožni odtenek → visoka moč svetlobe
	temen kožni odtenek → nizka moč svetlobe
	brez svetlobnega impulza ni stika s kožo → naprave ni mogoče aktivirati
	rdeča luč neveljaven kožni odtenek → naprave ni mogoče aktivirati

Preizkus na koži

Pred prvo uporabo naprave vam priporočamo, da preizkusite reakcijo kože, tako da napravo Braun Silk-expert uporabite na majhnem območju kože na delu telesa, kjer nameravate uporabiti napravo (približno 2 × 3 cm, kar ustreza dvema vzporednima svetlobnima impulzoma).



Opravite preizkus na majhnem območju kože, kot je opisano v spodnjem poglavju «NAČINI UPORABE NAPRAVE» v razdelku «Natančni način».

Počakajte 48 ur in preglejte preizkusno območje. Če je koža normalnega videza, začnite s prvo uporabo. Če je na koži vidna reakcija, prenehajte uporabljati napravo in se posvetujte s svojim zdravnikom. Naprave ne uporabljajte na območju preizkusa vsaj en teden po preizkusu.

NAČINI UPORABE NAPRAVE

Glede na mesto, kjer želite uporabiti napravo, lahko izbirate med **Načinom drsenja** in **Natančnim načinom**: Način drsenja omogoča hitro in učinkovito uporabo ter je priporočljiv za uporabo na večjih območjih kože (npr. na nogah, rokah, prsih in hrbtu), medtem ko je natančni način priporočljiv za obdelavo občutljivih ali majhnih, težko dostopnih območij, kot so kolena, goleni, gležnji, predel bikinija ali pod pazduho in ženskem obrazu.

Mesto uporabe mora biti brez dlak, hkrati pa mora biti čisto in suho. Preden pritisnete gumb za začetek uporabe, pogled umaknite stran od naprave, da se izognete svetli luči.

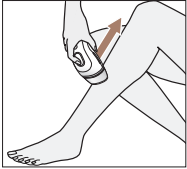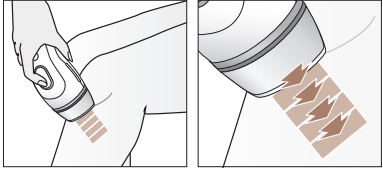Način drsenja	Natančni način
	
<p>1. Svetlobno okence (1) namestite tesno ob kožo in zagotovite, da sta oba senzorja za kožo (2) v stiku s kožo. Na kazalniku vklopa (3) svetijo bele lučke LED.</p>	
<p>2. Pritisnite in držite gumb za uporabo (5). Naprava začne utripati.</p>	<p>2. Pritisnite in takoj sprostite gumb za uporabo (5). Naprava odda svetlobni impulz.</p>
<p>3. Napravo počasi in neprekinjeno pomikajte od spodnjega do zgornjega dela zelenega območja. Napravo vselej ohranjajte v popolnem stiku s kožo, tako da neprekinjeno utripa.</p>	<p>3. Napravo dvignite in jo položite na sosednje območje, kjer želite uporabiti napravo. Počakajte, da na kazalniku vklopa zasvetijo bele lučke LED. Nato pritisnite in sprostite gumb za uporabo.</p>
<p>Ko zaključite s prvim drsečim gibom, napravo odmaknite s področja, kjer ste jo uporabili. Korake od 1 do 3 ponovite na naslednjem vzporednem območju.</p>	<p>Napravo uporabljajte mesto za mestom, dokler ne zaključite celotnega območja, ki ga želite obdelati.</p>

Da ne izpustite območij, predvidenih za obdelavo, svetlobno okence položite tik ob predhodno obdelano območje, tako da med posameznimi območji ni nobenega razmika.

Če občutite hudo bolečino, napravo takoj prenehajte uporabljati in se pred njeno ponovno uporabo posvetujte z zdravnikom.

Način pripravljenosti

Po 10 minutah nedejavnosti se naprava preklopi v stanje pripravljenosti (ki ga nakazuje utripajoča lučka na kazalniku vklopa). Če želite povrniti stanje PRIPRAVLJENOSTI, pritisnite katero koli tipko ali odstranite/znova vključite napajalni kabel.

Način mirovanja

Če naprave ne uporabljate 60 minut (ne pritisnete tipke), se ta preklopi v način mirovanja (nizka poraba). LED-kazalniki vklopa ne svetijo. Če želite povrniti stanje PRIPRAVLJENOSTI, pritisnite katero koli tipko ali odstranite/znova vključite napajalni kabel. Po bujenju se na napravi izvede standardni postopek «vklopa» (kazalniki vklopa enkrat zasvetijo).

Uporaba naprave na obrazu (samo za ženske)

Pred uporabo naprave

- Opravite preizkus na majhnem območju kože (glejte poglavje »Preizkus na koži«).
- Z območja, kjer nameravate uporabiti napravo, odstranite vse vidne dlake ter sledi ličil, losjonov in krem.
- Lahko uporabite zrcalo, da boste lažje namestili svetlobno okence na obraz.

Uporaba na obrazu, ličnicah in čeljusti (uporabite natančni način)

Svetlobno okence položite na kožo. Počakajte, da na kazalniku vklopa zasvetijo bele lučke LED. Preden pritisnete gumb za uporabo, zaprite oči in pogled umaknite stran od svetle luči. Naprave ne uporabite na istem območju dvakrat zaporedno, saj lahko to poveča možnost pojava neželenih učinkov.

Območje nad ustnicami

- Preprečite stik z ustnicami in nosnicama. Osrednji predel pod nosnicama je pogosto občutljiv.
- Ne uporabljajte na ustnicah, kjer je uporabljena trajna/poltrajna obroba za ustnice.
- NASVET: Ustnice lahko stisnete skupaj, da zagotovite, da se svetloba ne aktivira samo na zgornji ustnici.

Vrat in brada

Poraščenost pod brado je lahko gostejša in bolj groba. To lahko včasih povzroči rahlo pordelo kožo po uporabi naprave. Ta rdečica je začasna in bi morala povsem prenehati v 24 urah.

OPOMBA:

- Če se pojavi rdečica ali pekoč občutek, ki traja nekaj minut, za pomirjanje na območje položite hladno krpo/blazinico.
- Če na koži opazite kakršne koli pigmentne spremembe, npr. posvetlitev ali potemnitev, napravo prenehajte uporabljati. Poiščite zdravniško pomoč, da ugotovite vzrok, ki je lahko posledica obstoječega zdravstvenega stanja.

NAČRT UPORABE NAPRAVE

Začetna faza	1 tretma na teden (4-12 krat)
Uporaba za vzdrževanje učinka	Uporaba glede na vaše potrebe, na primer enkrat mesečno.

Običajen cikel rasti dlak se razlikuje pri posameznikih in lahko traja tudi do 16 mesecev, odvisno od dela telesa (pazduhe, spodnji del nog, predel bikinija). Ker so samo dlake v fazi rasti dovzetne za zdravljenje s svetlobo, je pomembno, da za doseganje trajno gladke kože opravite več postopkov. Iz tega razloga, priporočamo začetek z enim tretmajem na teden v obdobju 4 - 12 tednov.

Če dlake ne rastejo več, vam ni treba izvesti celotnega 12-tedenskega postopka. Začnete lahko z uporabo za vzdrževanje učinka.

PO UPORABI NAPRAVE

Ko prenehate uporabljati napravo, napravo izklopite tako, da napajalni kabel izvečete iz električne vtičnice.

Senzorja za zaznavanje kožnega odenka (2) in odsevno svetlobno okence (1) morate preveriti zaradi poškodb ter jih obrisati s suho krpo, ki ne pušča vlaken. Če opazite madeže ali črne pike, jih očistite takoj po uporabi.

Steklenega filtra (10) ne prijemajte ali čistite vsaj 5 minut po uporabi, da se ohladi.

Po uporabi priporočamo uporabo kreme za sončenje z zaščitnim faktorjem SPF 15 na zdravljenih območjih, ki so izpostavljeni soncu. Priporočamo vam, da se ne izpostavljate umetnim virom svetlobe, npr. ne obiskujete solarijev.

Vsaj 24 ur po uporabi naprave se izogibajte aktivnostim ali izdelkom za kožo, ki lahko povzročijo draženje kože. To vključuje uporabo masažne kadi ali savne, oprijeta oblačila, uporabo belilnih krem, parfumiranih izdelkov ali izdelkov za piling. Ti lahko povzročijo draženje, npr. srbečico in rdečico na zdravljenih predelih.

VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- Po uporabi napravo in zlasti svetlobno okence obrišite s suho krpo brez kosmov. Naprave ne spirajte ali potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Za čim večjo učinkovitost je pomembno, da na odsevni svetlobni okencu (9) ni umazanije, dlak ali drugih delcev. Za lažje čiščenje tega dela je prednji del mogoče sneti. Po odstranitvi ga lahko očistite z rahlo navlaženo krpo. Vselej se prepričajte, da je prednji del pred ponovnim nameščanjem povsem suh.
- Napravo shranite na hladnem, suhem mestu. Zagotovite, da so svetlobno okence in senzorji za zaznavanje kožnega odenka zaščiteni pred poškodbami.

MOŽNI STRANSKI UČINKI

Nekateri ljudje bodo med uporabo naprave doživeli rahlo nelagodje (npr. vroča ali pordela koža), kar je povsem običajno. Po aktivaciji svetlobnih impulzov lahko občutite vročino in mravljinčenje, ki ji sledi rdečica na koži. Tovrstne reakcije običajno prenehajo v 24 urah. Neželjeni učinki so navadno pojavijo takoj ali v 24 urah. Redko se lahko pojavijo šele po 72 urah. Če opazite neobičajne kožne reakcije, se obrnite na svojega zdravnika.

Stranski učinek	Ocena in odziv
Občutek toplote ali ščemenja med uporabo naprave. Ta navadno preneha v nekaj sekundah do ene minute in se zmanjša z nadaljnjo uporabo.	To je pričakovano in običajno za vse postopke s svetlobo IPL. Napravo lahko še naprej uporabljate skladno z navodili.
Močno neudobje ali bolečina med postopkom, ki po postopku ne preneha.	Napravo prenehajte uporabljati in se pred njeno ponovno uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.
Rdečica na koži, ki se pojavi med postopkom ali po njem in ki preneha v nekaj minutah do nekaj ur.	To je pričakovano in običajno za vse postopke s svetlobo IPL. Ko rdečica preneha, lahko napravo še naprej uporabljate skladno z navodili.
Rdečica na koži, ki v 24 do 48 urah po uporabi naprave ne preneha.	Napravo prenehajte uporabljati in se pred njeno ponovno uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.
V zelo redkih primerih:	
Oteklina in rdečica okoli mešičkov, ki preneha v dveh do treh dneh.	Ko oteklina in rdečica okoli mešička izgineta, lahko napravo še naprej uporabljate skladno z navodili.
Oteklina in rdečica okoli mešičkov, ki ne preneha v dveh do treh dneh.	Napravo prenehajte uporabljati in se pred njeno ponovno uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.
Začasne spremembe barve kože (posvetlitev ali potemnitev).	Če se barva kože spremeni, napravo prenehajte uporabljati in se posvetujte s svojim zdravnikom.
Hitrejša rast dlak na mestih uporabe naprave (verjetnost za ta pojav je večja pri osebah z mediteranskim tipom kože).	Če hitrejša rast ne preneha po več postopkih, napravo prenehajte uporabljati in se posvetujte s svojim zdravnikom.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Naslednje smernice za odpravljanje težav so vam lahko v pomoč pri reševanju začetnih težav, ki jih boste morda imeli s to napravo.

Težava	Rešitev
Ko svetlobno okence položite na kožo, kazalnik vklopa ne zasveti.	Preverite, ali je naprava vključena v električno omrežje in ali je v načinu pripravljenosti. Prepričajte se, da sta oba senzorja za zaznavanje kožnega odtenka v stiku s kožo. Po potrebi premaknite napravo tako, da bosta oba senzorja za zaznavanje kožnega odtenka v stiku s kožo.
Naprava ne deluje na majhnih območjih.	Oba senzorja za zaznavanje kožnega odtenka morata biti v stiku s kožo. Če je območje, na katerem želite uporabiti napravo, premajhno ali ukrivljeno, odčitavanje veljavnega kožnega odtenka ni možno in naprave ni mogoče aktivirati. Premestite napravo in zagotovite, da sta oba senzorja v stiku s kožo.
Na kazalniku vklopa utripa samo prva lučka LED v rdeči barvi.	Neveljavno odčitavanje kožnega odtenka. Vaš kožni odtenek je presvetel ali pretemen. Naprave ni mogoče aktivirati zaradi varnostnih vzrokov.
Prva lučka LED na kazalniku vklopa utripa belo.	Naprava se preklopi v način PRIPRAVLJENOSTI. Za ponovno aktiviranje pritisnite katero koli tipko.

Prva lučka LED na kazalniku vklopa utripa rdeče.	Snemljivo odbojno stekleno okence (9) je sneto. Okence zamenjajte.
Na kazalniku vklopa zasveti neobičajna kombinacija ene rdeče lučke LED in posameznih belih lučk LED.	Napaka naprave. Naprava ne bo delovala. Izključite in znova vključite napajalnik. Če težava ne preneha, se za popravilo obrnite na servisni center podjetja Braun.
Vse bele lučke LED utripajo.	Konec življenjske dobe izdelka. Doseženo je največje število svetlobnih impulzov (300.000).
Naprava je pokvarjena, počena ali ne deluje.	Naprave NE UPORABLJAJTE , če je poškodovana naprava, napajalni kabel ali napajanje. Če dvomite o varnosti ali sumite, da je naprava kakor koli poškodovana, jo prenehajte uporabljati.

Odlaganje

Izdelek vsebuje elektronske dele, ki jih je mogoče reciklirati. Za zaščito okolja naprave ne zavržite med gospodinjne odpadke, temveč jo odnesite na ustrezno lokalno zbirno mesto.



Podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila

Garancijski list

Za izdelek velja dveletna garancija, ki začne veljati z datumom izročitve blaga. Proizvajalec jamči, da bo izdelek deloval v garancijskem roku ob pravilni uporabi v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. V garancijski dobi bomo brezplačno odpravili vse okvare izdelka, ki so posledica napak v materialu ali izdelavi, tako da vam bomo izdelek po naši presoji popravili ali v celoti zamenjali.

Če pooblaščen servis vašega izdelka ne popravi v 45 dneh, imate pravico zahtevati nov izdelek. Za sprejem v reklamacijo se šteje dan, ko je izdelek sprejet v pooblaščen servis, pri prodajalcu (distributerju) ali v trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Čas zagotavljanja servisa, vzdrževanja, nadomestnih delov in priklopnih aparatov je 3 leta po preteku garancijskega roka.

Popravila na domu zaradi zahtevnosti in neprenosljivosti sodobne servisne opreme in razpoložljivosti rezervnih delov niso mogoča.

Garancija velja na območju Republike Slovenije, pa tudi v vseh državah, kjer izdelek dobavlja podjetje Braun ali njegov pooblaščen distributer.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija ne velja:

- Za okvare, ki so posledica nepravilne uporabe, normalne obrabe ali rabe oziroma napake, ki imajo zanemarljiv učinek na vrednost in delovanje izdelka.
- Ob vsakem posegu nepooblaščen osebe ali kakršnekoli druge predelave izdelka in če pri popravilu niso uporabljeni originalni Braunovi rezervni deli.

Za popravilo v garancijski dobi celotno napravo skupaj z računom in/ali izpolnjenim garancijskim listom odnesite ali pošljite na pooblaščen servisni center Braun:

JEŽEK SERVIS D.O.O. , Cesta 24. Junija 2, 1231 Ljubljana

Tel. št.: +386 1 561 66 30

E-mail: jezektrg.servis@siol.net

Potrošnik lahko zahtevo za popravilo v garancijski dobi za celotno napravo, skupaj z računom in/ali izpolnjenim garancijskim listom, prav tako uveljavlja tudi pri prodajalcu ali pri proizvajalcu (distributerju).

Za dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 2822.

Distributer: Orbico, d. o. o., Verovškova ul. 72, 1000 Ljubljana

Proizvajalec: Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 61476 Kronberg, Nemčija