

# BRAUN

## Skin<sup>®</sup> i·expert



90297800/VI-23 B



Scan Me!





## Braun Infolines

English	4	<b>UK</b>	<b>0800 783 7010</b>
Polski	14	<b>IE</b>	<b>1 800 509 448</b>
Český	25	<b>PL</b>	<b>801 127 286</b>
Slovenský	35	<b>CZ</b>	<b>800113322</b>
Magyar	45	<b>SK</b>	<b>800 333 233</b>
Hrvatski	55	<b>HU</b>	<b>(06-1) 451-1256</b>
Slovenščina	65	<b>HR</b>	<b>01/ 6690 330</b>
Türkçe	75	<b>SI</b>	<b>802 822</b>
Română	85	<b>RO</b>	<b>0800 890 194</b>
Ελληνικά	95	<b>GR</b>	<b>800 801 3458</b>
Български	106	<b>TR</b>	<b>0850 220 0911</b>
Українська	117	<b>RU</b>	<b>8 800 200 20 20</b>
		<b>UA</b>	<b>0 800 505 000</b>
		<b>BG</b>	<b>008001184973</b>


Type 6036

Braun GmbH  
Frankfurter Straße 145  
61476 Kronberg/Germany  
[www.braun.com](http://www.braun.com)  
[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)







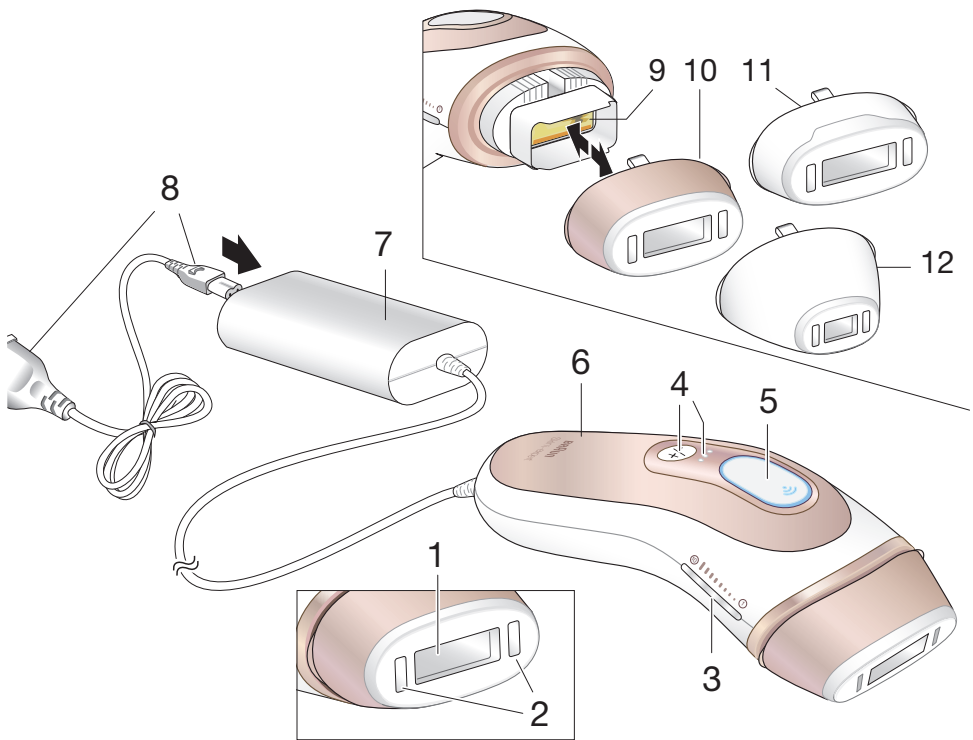







CyDen Ltd., Block A,  
Bay Studios Business Park,  
Fabian Way, Swansea SA18QB, UK





Skin tone & Body hair type chart:

						
	I	II	III	IV	V	VI
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ = suitable / odpowiedni / vhodné / vhodné / megfelelő / prikladno / Kullanim için uygun / primerno / adecvat / κατάλληλο / подходящий / підходить

✗ = not suitable / nieodpowiedni / použití není vhodné / nevhodné / nem megfelelő / ni prikladno / Kullanim için uygun değil / ni primerno / neadevcat / ακατάλληλο / не подходящий / не підходить

# Slovenščina

Naši izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in oblike. Naprava za odstranjevanje dlak z intenzivno pulzno svetlobo (IPL) Braun Skin i-expert, ki uporablja profesionalno svetlobno tehnologijo, vam omogoča trajno odstranjevanje neželenih, vidnih dlak v udobju vašega doma. Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo, vključno z vsemi kontraindikacijami, opozorili in varnostnimi informacijami, ter jih shranite za poznejšo uporabo.

IPL je zasnovana tako, da po določenem času uporabe naprave dolgotrajno zmanjša rast dlak. Naprava je najprimernejša za uporabo na naslednjih mestih:

**Ženske:** noge, roke, pazduhe, intimni predel in obraz (pod ličnicami)

**POZOR:** Naprave ne uporabljajte v bližini oči in vzdolž čela.

V intimnem predelu ne uporabljajte na predelih s sluznico, kot so male sramne ustnice, vagina ali anus

**Moški:** od ramen navzdol (prsni koš, hrbet, roke, trebuh, noge)

**POZOR:** Ne uporabljajte na obrazu, vratu in v predelu genitalij.

Uporaba na predelu moške brade ali za dlake na obrazu lahko vodi v trajne ali neenakomerne rezultate, ki lahko povzročijo neželene spremembe na obrazu.

Naprava Braun Skin i-expert ni primeren za vsakogar. Najučinkovitejša je pri uporabi na svetli do srednje temni koži in temnih dlakah. Oglejte si preglednico s kožnimi odtenki in barvnimi odtenki dlak na 3. strani, da ugotovite, ali je naprava primerna za vas.

## Opis

- 1 Svetlobno okence
- 2 Senzorji SensoAdapt™ za zaznavanje kožnega odtenka
- 3 LED-kazalnik vklopa/izklopa
- 4 Gumb za preklop med načini z indikatorskimi lučkami
- 5 Gumb za uporabo
- 6 Ročaj
- 7 Osnovna postaja
- 8 Napajalni kabel
- 9 Stekljeni filter (integriran UV filter)
- 10 Standardni nastavek
- 11 Široki nastavek\*
- 12 Nastavek za natančno prirezovanje

\*ni na voljo pri vseh modelih

## Kako deluje?

Naprava Braun Silk-expert deluje na melanin v mešičku dlake pod površino kože in s tem pripomore k prekinitvi cikla ponovne rasti dlake. S stalno in redno uporabo svetlobna energija neželenim dlakam prepreči, da bi dosegle površino kože.



Inteligentni senzorji za zaznavanje kožnega odtenka SensoAdapt™ (2) nenehno zaznavajo kožni odtenek pred vsakim svetlobnim impulzom, pri tem pa samodejno uravnavajo moč svetlobe za najboljšo učinkovitost in varnost. To omogoča uporabo na ustreznih kožnih odtenkih in vam hkrati prepreči uporabo, če imate pretemen kožni odtenek.

## Kontraindikacije

### Naprave ne uporabljajte ...

- Če imate temnejši kožni odtenek od odtenka V, prikazanega v preglednici s kožnimi odtenki na 3. strani. Ker temna koža vpije več svetlobne energije, lahko uporaba na zelo temni koži povzroči nelagodje/bolečino in neželene učinke (npr. opekline, mehurje, razbarvanje ali brazgotine) ter poškoduje kožo.
- Če ste noseči, dojite ali ste mlajši od 18 let, saj naprava ni bila preizkušena pri teh skupinah posameznikov.
- Če ste v preteklosti imeli kožnega raka ali predrakave lezije (npr. nevusi ali veliko število znamenj).
- Če ste nedavno pridobili umetno ali naravno zagorelost. Vaša koža je lahko po izpostavljanju sončnim žarkom dodatno občutljiva in še posebej dovzetna za stranske učinke uporabe IPL (npr. opekline, mehurji, razbarvanje ali brazgotine na koži). Prav tako se po uporabi IPL izogibajte izpostavljanju neposredni sončni svetlobi.

### Prav tako lahko določeni pogoji prepovedujejo uporabo te naprave.

#### Naprave ne uporabljajte v naslednjih primerih:

- Če imate kronično bolezen.
- Če imate kronično kožno obolenje (npr. luskavico ali vitiligo) ali poškodovano kožo (npr. sončne opekline, ureznine, odprte rane ali aktivne okužbe) na področjih, na katerih želite uporabiti napravo.
- Če imate krčne žile na področju, kjer želite uporabiti napravo.
- Če veste, da ste preobčutljivi na sončno svetlobo (fotosenzitivnost), ali če jemljete zdravila, ki lahko povečajo občutljivost kože (npr. Retin A, Accutane in/ali drugi lokalni retinoidi).
- Če ste na mestu, kjer želite uporabiti napravo, izvedli postopek luščenja kože (»piling«).
- V zgornjih primerih lahko naprava kožo poškoduje ali obstoječe stanje še poslabša. Lahko se pojavijo neželeni učinki, kot so opekline, mehurji in spremembe barve kože (hiper- ali hipopigmentacije) ali brazgotine.

Če niste prepričani, ali je uporaba naprave varna za vas, se posvetujte s svojima zdravnikom ali dermatologom.

Če redno in dalj časa jemljete kakršna koli zdravila, se posvetujte s svojim zdravnikom glede morebitnega vpliva na občutljivost kože na svetlobo.

## Opozorila

### Ne uporabljajte na ...

- Lasišču, obrveh ali v bližini ali v okolici oči. Uporaba na teh mestih lahko povzroči trajne poškodbe oči.
- Tetovažah ali trajnih ličilih na mestih uporabe.
- Bradavicah, spolovilu ali okoli anusa. Na teh predelih je lahko barva kože temnejša in/ali je prisotna večja gostota dlak, zaradi česar lahko uporaba naprave povzroči nelagodje/bolečino oz. poškodbe kože.
- Temno rjavih ali črnih pikah, kot so pege, materina znamenja, ali bradavice na mestih uporabe.
- Bradi/obraznih dlakah pri moških.

Uporaba te naprave ni priporočena na področjih z dermalnimi polnili.

Napravo na istem območju uporabljajte največ enkrat tedensko. Pri podaljšanji ali ponavljajoči se uporabi na enem mestu lahko pride do poškodb kože.



### Varnost oči

Ne glejte neposredno v stekleni filter (9) oziroma naprave ne usmerjajte proti očem. Za zaščito svojih oči in oči oseb v bližini se bo naprava vklopila samo, ko sta oba sensorja za zaznavanje kožnega odtenka v stiku s kožo. Če se naprava vklopi, ko je samo en senzor v stiku s kožo oziroma ni noben senzor v stiku s kožo, napravo takoj Prenehajte uporabljati in se obrnite na prodajalca.

Ob neupoštevanju navodil je možna poškodba oči (ki lahko vodi v izgubo vida) ali kože. Oči zaščitite pred izpostavljenostjo. Naprave ne uporabljajte na vekah ali v bližini oči.

Priporočamo vam, da se med pritiskanjem na gumb za delovanje obrnete stran od naprave.

### Previdnostni ukrepi

- Naprava ni namenjena osebam, mlajšim od 18 let.
- Osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo samo pod nadzorom, razen če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, povezane z njeno uporabo.
- Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne bodo igrali z napravo. Napravo vselej shranite zunaj dosega otrok.
- Z uporabo so povezana različna možna tveganja: izpostavljenost izhodni svetlobi, ki lahko povzroči opekline ali poškoduje oči, električni udar, zadavljenje s kablom.

### Električna in požarna varnost

Napravo in kable redno pregledujte zaradi vidnih znakov poškodb. V primeru poškodb ali razpok napravo prenehajte uporabljati. Uporaba poškodovane naprave vodi v električni udar. V primeru okvare naj napravo pregledajo in popravijo v pooblaščenem servisnem centru. Nepooblaščen popravila lahko vodijo v resno nevarnost za uporabnika.

### POZOR

V izogib nevarnosti ali poškodbam ob izpadu elektrike napravo po uporabi vselej izklopite iz električnega omrežja.

Naprave v izogib nevarnosti poškodb svetilke ne izpostavljajte velikim udarom.

Naprave ne postavljajte tako, da jo je težko izklopiti iz električnega omrežja.

Vključene naprave v izogib nevarnosti požara in opeklina ne pustite nenadzorovane.

### OPOZORILO

Če je stenska vtičnica, ki jo uporabljate za napajanje opreme, slabo povezana, postane vtič opreme vroč. Prepričajte se, da v izogib nevarnosti požara in opeklina opremo vključite v pravilno nameščeno stensko vtičnico.

Naprave ne spreminjajte. Za napravo ne uporabljajte drugih komponent in je ne predelujte. To lahko napravo poškoduje in jo pokvari.

## NEVARNOST

Naprave nikoli ne poskušajte popravljati in odpirati sami, saj ste lahko pri tem izpostavljeni nevarnim električnim sestavnim delom in energiji pulzirajoče svetlobe, ki lahko povzroči resne telesne poškodbe in/ali trajne poškodbe oči.

**OPOZORILO:** Voda in elektrika sta nevarna kombinacija!



V izogib nevarnosti električnega udara:

- te naprave ne uporabljajte v mokrem okolju (npr. v kopalnici, blizu prhe ali bazena);
- ne dovolite, da voda steče v napravo.

V izogib električnemu udaru nikoli ne uporabljajte mokre naprave.

Ne uporabljajte poškodovane naprave (npr. razpoke v ohišju, poškodovan kabel itd.). Notranji deli so pod električno napetostjo, ki je lahko nevarna.

Okence za izvajanje postopka (1) redno preverjajte glede morebitnih poškodb:

Naprave ne uporabljajte, če je stekleni filter (9) počen ali če ni nameščen.

Ne uporabljajte, če vgrajeni reflektor manjka ali ni na pravem mestu.

Steklenega filtra se ne dotikajte med uporabo ali takoj po uporabi, saj se ta segreje.

Naprave ne čistite s čistili na osnovi nafte ali vnetljivih čistil (alkohola, acetona), saj ta predstavljajo nevarnost požara.

Ne uporabljajte jedkih čistil. Ta lahko poškodujejo ali opraskajo stekleni filter.

Naprave ne poskušajte uporabljati za druge namene, razen za odstranjevanje neželenih dlak.

Naprave ne uporabljajte na drugih površinah, razen na koži. Gumba za uporabo ne pritiskajte, če svetlobno okence (1) ni povsem v stiku s kožo.

Ne zamašite prezračevalnih odprtin. Naprava se lahko pregreje in predstavlja nevarnost električnega udara ali požara.

Pri daljši uporabi lahko temperatura naprave doseže največ 60 °C. Po uporabi napravo odstranite s kože.

## Uporaba

### Priprava mesta, kjer boste uporabili napravo

Pred uporabo naprave odstranite vse vidne dlake s kože. Uporabite lahko svoj najljubši način odstranjevanja dlak. Če želite ohraniti čisto in nedotaknjeno svetlobno okence, se prepričajte, da na površini kože ni več dlačic. Očistite mesto, kjer boste uporabili napravo, in ga osušite.





### Vklop naprave:

Z napajalnim kablom (8) priključite osnovno postajo v električno vtičnico. Za aktivacijo naprave pritisnite na kateri koli gumb (4 ali 5). LED-kazalnik vklopa/izklopa (3) enkrat zasveti in se vklopi ventilator.

To pomeni, da je naprava v stanju PRIPRAVLJENOSTI. Med delovanjem se naprava nekoliko segreje.

### Samodejna prilagoditev svetlobe

Ko sta oba senzorja za zaznavanje kožnega odtenka (2) v stiku s kožo, naprava odčita vaš kožni odtenek in izbere ustrežno moč svetlobe, ki jo nakazuje bela lučka LED na kazalniku (3). To pomeni, da je naprava pripravljena na oddajanje svetlobnih impulzov.

	svetel kožni odtenek → visoka moč svetlobe
	temen kožni odtenek → (nizka moč svetlobe s hitrim utripanjem)
 brez svetlobnega impulza	ni stika s kožo → Naprava ne utripa.
 rdeča luč	neveljaven kožni odtenek → Naprava ne utripa.

### Način «Sensitive»

Če želite zmanjšati intenzivnost svetlobe, pritisnite gumb za preklop med načini (4). Preklapljate lahko med naslednjimi tremi nastavitvami:

**Standard:** 3 indikatorske lučke

**Sensitive:** 2 indikatorski lučki

**Extra sensitive:** 1 indikatorska lučka (najmanjša intenzivnost svetlobe s hitrim utripanjem)

Nastavitve načinov «Sensitive» in «Extra Sensitive» so namenjene občutljivim predelom in začetnikom. Ob zmanjšani jakosti svetlobe boste za doseganje želenega učinka napravo morda morali uporabiti večkrat.

Lučke na kazalniku vklopa utripnejo in tako potrdijo spremembo nastavitve jakosti svetlobe.

Če gumb za preklop med načini (4) zadržite dlje kot tri sekunde, se naprava deaktivira.

Po 10 minutah se naprava samodejno izključi.

Za ponovno aktivacijo pritisnite na kateri koli gumb.

### Preizkus na koži

Pred prvo uporabo priporočamo, da preizkusite odziv kože. To lahko storite na manjšem delu kože na enem od naslednjih delov telesa: spodnji del noge, zgornji del noge, pod pazduho, spodnji del roke.

Enega za drugim sprožite dva svetlobna impulza, kot je opisano spodaj v poglavju «Metode uporabe», razdelek «ŠTEMLJANJE». Počakajte 15 minut in pregledajte preizkusni predel. Če je koža videti normalno, začnite s prvo uporabo. Če se pojavi kožna reakcija, preklopite na način za občutljivo kožo in ponovite preizkus. Počakajte še 15 minut. Če kožna reakcija ne izzveni, počakajte še 24 ur. Če je po tem času kožna reakcija še vedno prisotna, prenehajte z uporabo naprave in se posvetujte z zdravnikom.

## Metode uporabe

Mesto uporabe mora biti brez dlak, hkrati pa mora biti čisto in suho. Preden pritisnete gumb za začetek uporabe, pogled umaknite stran od naprave, da se izognete svetli luči. V redkih primerih se bliskanje uporabnikom zdi presvetlo. Vendar to ne povzroča nikakršnih varnostnih tveganj.

Za večje udobje priporočamo uporabo v dobro osvetljenem prostoru, kar pomaga zmanjšati občutek svetlosti.

<p><b>DRSENJE</b> za hitro in učinkovito obdelavo velikih območij (na primer nog)</p>		<p><b>ŠTEMLJANJE</b> za obdelavo majhnih, težko dostopnih območij (na primer obraza pri ženskah, intimni predel, predela pod pazduho, kolen, goleni ali gležnjev)</p>	
<p>1. Svetlobno okence (1) namestite tesno ob kožo in zagotovite, da sta oba senzorja za kožo (2) v stiku s kožo. Na kazalniku vklopa (3) svetijo bele lučke LED.</p>			
<p>2. Pritisnite in držite gumb za uporabo (5). Naprava začne utripati.</p>		<p>2. Pritisnite in takoj sprostite gumb za uporabo (5). Naprava odda svetlobni impulz.</p>	
<p>3. Napravo počasi in neprekinjeno pomikajte od spodnjega do zgornjega dela želenega območja. Napravo vselej ohranjajte v popolnem stiku s kožo, tako da neprekinjeno utripa.</p>		<p>3. Napravo dvignite in jo položite na sosednje območje, kjer želite uporabiti napravo. Počakajte, da na kazalniku vklopa zasvetijo bele lučke LED. Nato pritisnite in sprostite gumb za uporabo.</p>	

Ko zaključite s prvim drsečim gibom, napravo odmaknite s področja, kjer ste jo uporabili. Korake od 1 do 3 ponovite na naslednjem vzporednem območju.

Napravo uporabljajte mesto za mestom, dokler ne zaključite celotnega območja, ki ga želite obdelati.

Da ne izpustite območij, predvidenih za obdelavo, svetlobno okence položite tik ob predhodno obdelano območje, tako da med posameznimi območji ni nobenega razmika.

Na istem območju se izogibajte istočasni uporabi več naprav oz. dvakratni zaporedni uporabi naprave, saj lahko to poveča možnost pojava neželenih učinkov.


Če občutite hudo bolečino, napravo takoj prenehajte uporabljati in se pred njeno ponovno uporabo posvetujte z zdravnikom.

### Nastavek(i) za obdelavo

Standardni nastavek (10) lahko uporabljajte na vseh področjih.

Široki nastavek (11)\* je učinkovit na večjih območjih telesa.

Nastavek za natančno prirezovanje (12)\* je oblikovan posebej za majhna, ukrivljena in težje dostopna področja. Če je vaš Silk-expert dobavljen z dvema nastavkoma za natančno prirezovanje, je en od njiju označen s ⊕. To pomaga pri ločevanju med nastavkom za uporabo na obrazu in nastavkom za uporabo na drugih delih telesa.

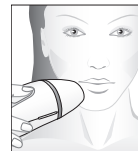

### Kako obdelati obraz (samo pri ženskah)

- Preden uporabite napravo na obrazu, morate opraviti preizkus na majhnem območju kože. Z območja, kjer nameravate uporabiti napravo, odstranite vse vidne dlake ter sledi ličil, losjonov in krem.
- Preden pritisnete gumb za uporabo, zaprite oči in pogled umaknite stran od svetle luči. Naprave ne uporabite na istem območju dvakrat zaporedno, saj lahko to poveča možnost pojava neželenih učinkov.
- Med uporabo na območju nad ustnicami se izogibajte stiku z ustnicami in nosnicama. Osrednji predel pod nosnicama je morda občutljiv.
- Ne uporabljajte na ustnicah, kjer je uporabljena trajna/poltrajna obroba za ustnice.
- NASVET: Ustnice lahko stisnete skupaj, da zagotovite, da se svetloba ne aktivira samo na zgornji ustnici.
- Poraščenost pod brado je lahko gostejša in bolj groba. To lahko včasih povzroči rahlo pordelo kožo po uporabi naprave. Ta rdečica je začasna in bi morala povsem prenehati v 24 urah.

### Kako obdelati intimni predel (samo pri ženskah)



Bikini predel



Predel med nogami



Predel med ritnicama

- Preden uporabite napravo na intimnem predelu, morate opraviti preizkus na manjšem delu kože.
- S predela, kjer nameravate uporabiti napravo, odstranite vse vidne dlake in sledi krem. Z ogledalom preverite, ali ste odstranili vse dlačice.
- Stojte, usedite se ali počepnite, da dosežete vse predele, ki jih želite obdelati.

Za obdelavo intimnih predelov uporabite glavo za natančno obdelavo (12).

Da preprečite neugodje, intimni predel obdelajte v načinu za izjemno občutljivo kožo. Pridržite gumb načina (4), dokler ni prikazana samo ena lučka.

Za intimni predel priporočamo metodo štempljanja:

1. Svetlobno okence namestite tesno ob kožo in zagotovite, da sta oba senzorja za kožo v stiku s kožo. Kožo raztegnite s prsti, da izboljšate stik.
2. Na kazalniku vklopa (3) svetijo bele lučke LED.
3. Pritisnite in takoj sprostite gumb za uporabo (5). Naprava odda svetlobni impulz.
4. Napravo dvignite in jo položite na sosednje območje, kjer želite uporabiti napravo. Ponavljajte koraka 2 do 4 in nadaljujte mesto za mestom, dokler ne zaključite celotnega predela.

### OPOMBA:

- Če se pojavi rdečica ali pekoč občutek, ki traja nekaj minut, za pomirjanje na območje položite hladno krpo/blazinico.

- Če na koži opazite kakršne koli pigmentne spremembe, npr. posvetlitev ali potemnitev, napravo prenehajte uporabljati. Poiščite zdravniško pomoč, da ugotovite vzrok, ki je lahko posledica obstoječega zdravstvenega stanja.
- Ker je koža na teh predelih običajno temnejša, naprava iz varnostnih razlogov morda ne bo utripala, čeprav ima naprava ustrezen stik s kožo.

## Načrt uporabe naprave

Začetna faza (tedensko)	1 tretma na teden (4-12 tednov;)
Uporaba za vzdrževanje učinka (mesečno)	Uporaba glede na vaše potrebe, na primer vsaka 1-2 meseca

Običajen cikel rasti dlak se razlikuje pri posameznikih in lahko traja tudi do 16 mesecev, odvisno od dela telesa. Ker so samo dlake v fazi rasti dovzetne za zdravljenje s svetlobo, je pomembno, da za doseganje trajno gladke kože opravite več postopkov. Iz tega razloga, priporočamo začetek z enim tretmajem na teden v obdobju 4 - 12 tednov.

Če dlake ne rastejo več, vam ni treba izvesti celotnega 12-tedenskega postopka. Začnete lahko z uporabo za vzdrževanje učinka.

## Po uporabi naprave

Ko prenehate uporabljati napravo, odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.

Po uporabi priporočamo uporabo kreme za sončenje z zaščitnim faktorjem SPF 15 na zdravljenih območjih, ki so izpostavljeni soncu. Priporočamo vam, da se ne izpostavljate umetnim virom svetlobe, npr. ne obiskujete solarijev.

Vsaj 24 ur po uporabi naprave se izogibajte aktivnostim ali izdelkom za kožo, ki lahko povzročijo draženje kože. To vključuje uporabo masažne kadi ali savne, oprijeta oblačila, uporabo belilnih krem, parfumiranih izdelkov ali izdelkov za piling. Ti lahko povzročijo draženje, npr. srbečico in rdečico na zdravljenih predelih.

## Čiščenje in shranjevanje

Po vsaki uporabi glede morebitnih poškodb preverite okence za izvajanje postopka (1), senzorje za zaznavanje kožnega odtenka (2), stekleni filter (9) in vgrajeni reflektor.

Steklenega filtra takoj po uporabi ne prijemajte in ne čistite. Pustite, da se ohladi. Če so na okencu za izvajanje postopka prisotni sledovi črnih pik, ga obrišite s suho krpo brez kosmov.

Naprave ne spirajte ali potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.

Za zagotavljanje najboljšega delovanja na glavah (10, 11, 12) in vdelenih reflektorjih ne sme biti prahu, las ali drugih ostankov. Ne čistite jih z vodo, ampak jih pazljivo obrišite s suho krpo. Napravo shranite na hladnem, suhem mestu. Zagotovite, da so svetlobno okence in senzorji za zaznavanje kožnega odtenka zaščiteni pred poškodbami.

## Možni stranski učinki

Nekateri ljudje bodo med uporabo naprave doživeli rahlo nelagodje (npr. vroča ali pordela koža), kar je povsem običajno. Po aktivaciji svetlobnih impulzov lahko občutite vročino in mravljinčenje, ki ji sledi rdečica na koži. Tovrstne reakcije običajno prenehajo v 24 urah. Neželeni učinki so navadno pojavijo takoj ali v 24 urah. Redko se lahko pojavijo šele po 72 urah. Če opazite neobičajne kožne reakcije, se obrnite na svojega zdravnika.

Stranski učinek	Ocena in odziv
Občutek toplote ali ščemenja med uporabo naprave. Ta navadno preneha v nekaj sekundah do ene minute in se zmanjša z nadaljnjo uporabo.	To je pričakovano in običajno za vse postopke s svetlobo IPL. Napravo lahko še naprej uporabljate skladno z navodili.
Močno neudobje ali bolečina med postopkom, ki po postopku ne preneha.	Napravo prenehajte uporabljati in se pred njeno ponovno uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.
Rdečica na koži, ki se pojavi med postopkom ali po njem in ki preneha v nekaj minutah do nekaj ur.	To je pričakovano in običajno za vse postopke s svetlobo IPL. Ko rdečica preneha, lahko napravo še naprej uporabljate skladno z navodili.

Rdečica na koži, ki v 24 do 48 urah po uporabi naprave ne preneha.	Napravo prenehajte uporabljati in se pred njeno ponovno uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.
<b>V zelo redkih primerih:</b>	
Oteklina in rdečica okoli mešičkov, ki preneha v dveh do treh dneh.	Ko oteklina in rdečica okoli mešička izgineta, lahko napravo še naprej uporabljate skladno z navodili.
Oteklina in rdečica okoli mešičkov, ki <b>ne</b> preneha v dveh do treh dneh.	Napravo prenehajte uporabljati in se pred njeno ponovno uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.
Začasne spremembe barve kože (posvetlitev ali potemnitev).	Če se barva kože spremeni, napravo prenehajte uporabljati in se posvetujte s svojim zdravnikom.
Hitrejša rast dlak na mestih uporabe naprave (verjetnost za ta pojav je večja pri osebah z mediteranskim tipom kože).	Če hitrejša rast ne preneha po več postopkih, napravo prenehajte uporabljati in se posvetujte s svojim zdravnikom.

V primeru neželenih učinkov se obrnite na pooblaščen nacionalni organ in na proizvajalca naprave.

## Odpravljanja težav

Naslednje smernice za odpravljanje težav so vam lahko v pomoč pri reševanju začetnih težav, ki jih boste morda imeli s to napravo.

Težava	Rešitev
Ko svetlobno okence položite na kožo, kazalnik vklopa ne zasveti.	Prepričajte se, da je naprava vključena v električno omrežje. Za aktivacijo naprave pritisnite na kateri koli gumb (4 ali 5). Prepričajte se, da sta oba senzorja za zaznavanje kožnega odtenka v stiku s kožo. Po potrebi premaknite napravo tako, da bosta oba senzorja za zaznavanje kožnega odtenka v stiku s kožo.
Naprava ne deluje na majhnih območjih.	Glavo za natančno prerezovanje (če je na voljo) uporabite na majhnih, težko dostopnih območjih. Prepričajte se, da sta oba senzorja za zaznavanje kožnega odtenka v stiku s kožo.
Utripajoče zaporedje se upočasni.	Naprava je v načinu toplotne zaščite. Da se vrne v normalno hitrost, pustite, da se naprava ohladi.
Na kazalniku vklopa utripa samo prva lučka LED v rdeči barvi.	Neveljavno odčitavanje kožnega odtenka. Vaš kožni odtenek je presvetel ali pretemen. Naprava ne utripa.
Sredinska lučka gumba za preklon med načini utripa.	Naprava se izklopi. Za ponovno aktivacijo pritisnite na kateri koli gumb.
Prva lučka LED na kazalniku vklopa utripa rdeče.	Glava (10, 11, 12) je odstranjena. Znova jo pritrdite.
Na kazalniku vklopa zasveti neobičajna kombinacija ene rdeče lučke LED in posameznih belih lučk LED.	Napaka naprave. Naprava ne bo delovala. Odklopite in znova priklopite. Če težava ne preneha, se za popravilo obrnite na servisni center podjetja Braun.
Vse bele lučke LED utripajo.	Konec življenjske dobe izdelka. Doseženo je največje število svetlobnih impulzov (400.000).
Naprava je pokvarjena, počena ali ne deluje.	Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan ročaj, osnovna postaja ali napajalni kabel. Če dvomite o varnosti ali sumite, da je naprava kakor koli poškodovana, jo prenehajte uporabljati.

## Odlaganje

Izdelek vsebuje elektronske dele, ki jih je mogoče reciklirati. Za zaščito okolja naprave ne zavržite med gospodinjske odpadke, temveč jo odnesite na ustrezno lokalno zbirno mesto.



## Oznake in simboli

Bazna postaja je označena z naslednjimi simboli:

	Uporabljeni del tipa BF		Serijska številka
	Oprema razreda II		Oznaka za odstranjevanje odpadkov (WEEE) Evropske unije
	Optično sevanje		Oznaka o skladnosti Evropske unije
	Sledite navodilom za uporabo		Proizvajalec
	Ni primerno za uporabo v kadi ali pod prho		Hranite na suhem

## Tehnične specifikacije

Hitrost ponavljanja:	vsake 0,5–0,9 sekunde (odvisno od nastavitve), neprekinjeno delovanje
Največji optični izhod:	6 J/cm <sup>2</sup>
Pulzna dolžina:	2,6 msec FWHM
Valovna dolžina:	510 – 2000 nm
Napajalni vhod:	100–240 V~, 50–60 Hz, 2,0 - 1,0 A
Delovna temperatura:	5 °C–40 °C
Optimalna delovna temperatura:	15 °C–30 °C
Delovna vlažnost:	do 93 % relativne vlažnosti brez kondenzata
Delovni tlaki:	od 700 hPa do 1060 hPa
Področje obdelave (velikost pike):	
Standardni nastavek:	3 cm <sup>2</sup>
Veliki nastavek:	4 cm <sup>2</sup>
Nastavek za natančno prirezovanje:	1,5 cm <sup>2</sup>

### Transportni pogoji

Temperaturno območje:	od -25 °C do 70 °C
Vlažnost:	do 93 % relativne vlažnosti brez kondenzata
Tlaki:	od 500 hPa do 1060 hPa

Naprava vključuje 400.000 bliskov in je namenjena največ 6-letni uporabi s strani ene same osebe.

Ta naprava je skladna z direktivo EU o radijski opremi 2014/53/EU in predpisi Združenega kraljestva o radijski opremi iz leta 2017.

Naprava vsebuje radijski modul, ki deluje v pasu od 2,401 do 2,473 GHz z največjo močjo 20 mW (13 dBm). S tem družba Braun GmbH izjavlja, da je radijska oprema za tip 6036 v skladu z Direktivo 2014/53/EU in s pravnimi instrumenti Združenega kraljestva.

Naprava je namenjena za povezavo z omrežjem z naslednjimi lastnostmi.

- Odprto ali zasebno omrežje z dostopom do spleta
- WLAN 802.11 b/g/n
- Frekvenčni pas: 2,4 GHz
- Kanal 1-11
- WPA/WPA2/WPA3

Pravilno delovanje naprave ni odvisno od povezave z omrežjem. Dodatne informacije najdete v pogojih uporabe mobilne aplikacije.

Celotno besedilo izjav EU in UKCA o skladnosti je na voljo na naslednjem URL-naslovu:  
<https://dev-en-gb-nx.braun.com/en-gb/ce>

Ta naprava je skladna z naslednjimi standardi EMC in najnovejšimi dopolnitvami, ki veljajo za gospodinjske in medicinske pripomočke. To so:

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-17 (2020-09) V3.2.4, ETSI EN 3000 328 V 2.2.2. (2019-07), EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 del 15B 15.107 in 15.109, IECS-003 izdaja 6.0

Ta naprava je skladna tudi z naslednjimi varnostnimi standardi in najnovejšimi dopolnitvami, ki veljajo za gospodinjske in medicinske pripomočke. To so:

IEC 60335-1:2012, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 in 2014, IEC 60601-2-83:2019.

Ta naprava je razvrščena kot izvzeta iz rizične skupine za vse nevarnosti.

Za spektralno obsevanje glejte Prilogo 1 na strani 128.

Priloga 1: Spektralno obsevanje

Podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila